

Serenity®

J-D.com



Système d'appel infirmière radio interactif avec acquittement des appels

- Etanche
- Débrochable
- Désinfectable
- Acquit Infrarouge
- Garantie de transmission
- Détection de «fugue»
- Traçabilité

*Conçu pour les
Résidences 3ème âge
Hôpitaux / CHU
Hôpitaux locaux*

Technologie
ACTIV Link®



Serenity est le premier système d'appel infirmière sécurisé interactif avec garantie de transmission. La technologie ACTIV'link® développée par J-D.com pour sécuriser les transmissions radio est le fruit de son expérience de l'appel infirmière sans fil. La technologie ACTIV'link® est la seule qui puisse garantir à 100% l'aboutissement des appels. Alliant le dialogue, la correction d'erreur et la redondance, la technologie ACTIV'link® est la garantie de sécurité des patients.

Médaille et/ou Montre émetteur - Récepteur étanche



- Technologie de transmission sécurisée ACTIV'link®
 - Appel «Normal»
- Appel D.A.T.I. (Dispositif d'alerte pour travailleur isolé)
 - Appel «Assistance»
- «Tranquillisation» par LED (allumage à l'accusé de réception de la centrale)
- Acquiescement des appels par badges ou médaillons infra-rouge avec identification du personnel
- «Sécurité positive» (contrôle du fonctionnement du médaillon/ de la montre et de la couverture radio)
- Contrôle de l'état de charge de la pile centralisé
 - Cordon débrochable de sécurité
- Programmation par infra-rouge et radio
 - Traçabilité de tous les événements
 - Fréquences : 868 / 446 MHz
- Indices IP : bracelet =IP67 ; pendentif=IP57

Unité d'appel de chambre "radio"



- Technologie de transmission sécurisée ACTIV'link®
- Fonctions d'appels: Normal, Urgence, Acquit / Présence, Assistance
 - Appels depuis l'unité (poussoirs membranes nettoyables et désinfectables)
- Appels depuis 1 ou 2 "poires" raccordées sur l'unité (sécurité à l'arrachement)
- Bornier de raccordement de boutons extérieurs assurant les 3 types d'appels
 - «Tranquillisation» par LED et buzzer (à l'accusé de réception de la centrale)
 - Acquit des appels par badges ou médaillons infra-rouge avec identification du personnel
- «Sécurité positive» (contrôle du fonctionnement de l'unité et de la couverture radio)
 - Contrôle de l'état de charge de la pile centralisé
- Bornier de raccordement d'un «hublot 2 feux» avec «présence» (blanc) et appels (normal: rouge, urgence: rouge clignotant)
 - Traçabilité de tous les événements
 - Fréquences : 868 / 446 MHz
 - Piles : 4 X LR6

Détails de l'unité d'appel de chambre



Connecteurs

- Boutons / Tirettes externes
- Hublots de couloirs
- Alimentation extérieure
- RJ11 pour poires d'appel

Autres accessoires

Hublot 2 feux



Tirette sanitaire




Poires d'appels



Photos non contractuelles

Synoptique du fonctionnement

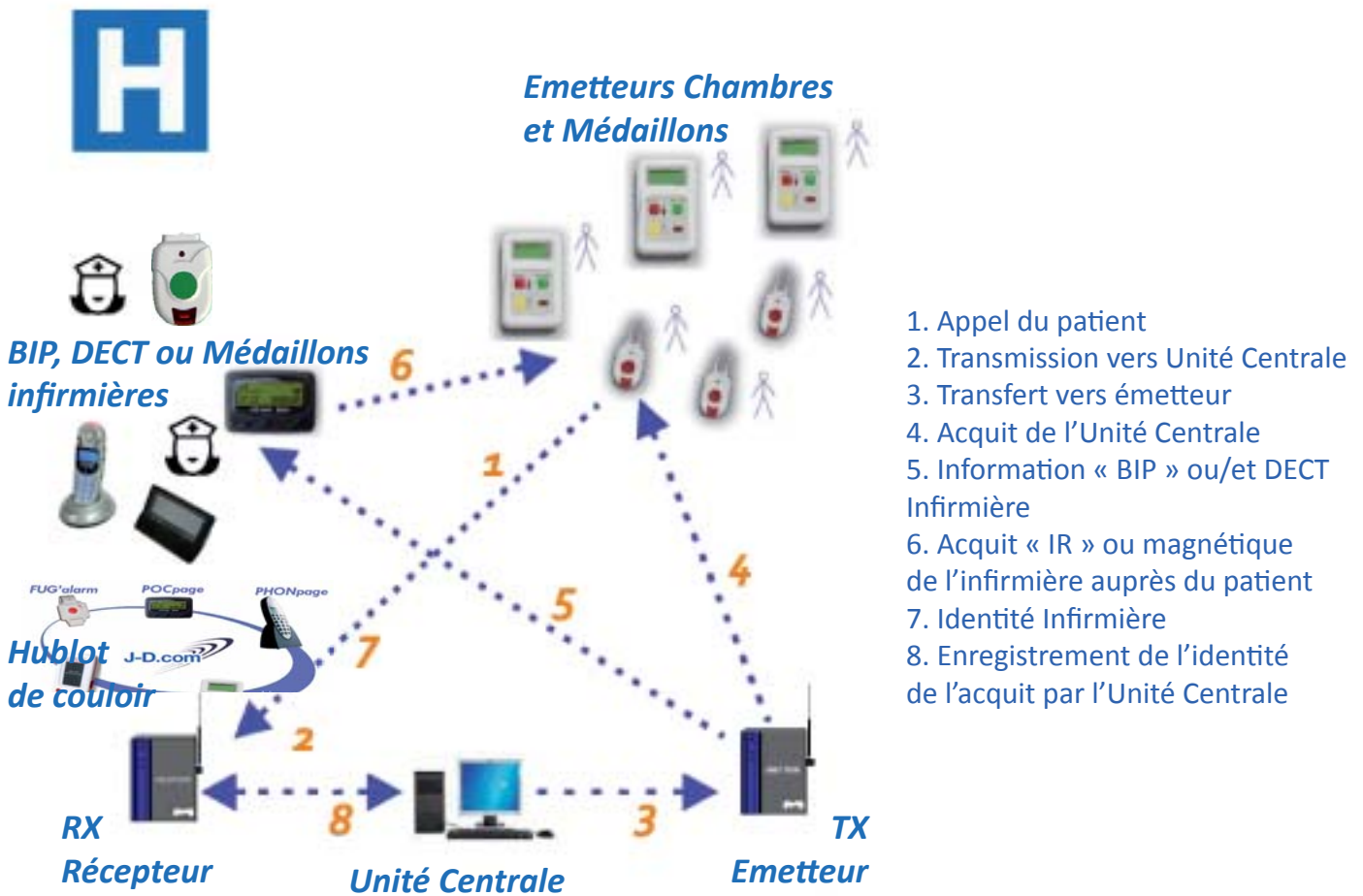

Badge d'acquit Infra-Rouge JD-120

- Transmet l'identité du personnel lors de l'acquittement



DISTRIBUTEUR :